

Glow

Mode d'emploi



2109_006_FR



www.silkn.eu • info@silkn.eu
Donk IB, 2991 LE Barendrecht
Nederland
Invention Works B.V.

Beautiful Technology
Silk'n[®]

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd.
Tous droits réservés

Mention légale

Home Skinovations Ltd. se réserve le droit de modifier ses produits ou leurs spécifications afin d'améliorer leurs performances, leur fiabilité ou leur mise en production. Les informations fournies par Home Skinovations Ltd. sont supposées exactes et fiables au moment de l'impression du présent document. Toutefois, Home Skinovations Ltd. décline toute responsabilité quant à l'usage qui en est fait. Son implication n'octroie aucune licence ni aucun autre brevet ou droit de brevets de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite expresse de Home Skinovations Ltd. Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient des brevets et des demandes de brevets en cours, des marques déposées, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle portant sur les questions traitées dans le présent document. La remise de ce document ne vous octroie aucune licence sur ces brevets, marques déposées, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, sauf en cas de dispositions contraires expressément stipulées dans un accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk IB, 2991 LE Barendrecht, Pays-Bas
www.silkn.eu – info@silkn.eu



Ce symbole d'avertissement vous fournit des informations complémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Lisez le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits arborant ce symbole répon-

dent à toutes les exigences en vigueur dans l'Espace économique européen.

Consignes de sécurité

Le présent manuel fournit des consignes de sécurité liées au produit. Par conséquent, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout dommage et blessure causés par un usage impropre.

- ⚠ Avant et après l'utilisation, maintenez toujours l'appareil propre et désinfecté.
- ⚠ Si votre peau présente des blessures, des plaies, de l'eczéma, etc., n'utilisez pas l'appareil.
- ⚠ N'utilisez pas cet appareil pendant la période de rétablissement après une opération.
- ⚠ N'utilisez pas cet appareil près des yeux ou de plaies.
- ⚠ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des problèmes physiques, sensoriels ou mentaux, sauf sur instruction d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- ⚠ Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cet appareil.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par semaine. Ne dépassez pas 15 minutes de traitement par séance.
- ⚠ Vérifiez que l'appareil est éteint durant le nettoyage et l'entretien.
- ⚠ Ne chargez jamais l'appareil pendant l'utilisation.
- ⚠ L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Évitez tout contact avec l'eau.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil dans le bain.
- ⚠ en cas de douleur ou d'apparition de lésion sur la peau ou le corps, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- ⚠ Ne démontez ni ne réparez pas le produit vous-même.
- ⚠ Utilisez le câble usb fourni pour recharger l'appareil et assurez-vous que la tension de charge répond aux exigences du produit.

Caractéristiques

Modèle: FAC01
Tension nominale: 3,7 V
Capacité de la batterie: 500 mAh
Puissance de sortie: 5,0 V ---IA
Fréquence: 20 - 30 KHZ

Fonctionnement

- Nettoyez l'appareil avant la première utilisation, tel que décrit dans le chapitre « Nettoyage ».
- Avant de nettoyer une zone du visage pour la première fois, effectuez un test de sensibilité cutanée sur une zone ciblée. Démarrez ensuite le traitement uniquement si vous ne présentez aucune réaction indésirable.
- Appuyez sur le bouton on/off pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez le mode souhaité à l'aide des flèches : Nettoyage, Hydratation ou Lifting.
- **Mode Nettoyage:** Appliquez une mousse nettoyante ou une lotion sur l'ensemble du visage. Évitez le contour des yeux. Polissez doucement la peau du visage avec l'appareil pendant 5 à 10 secondes. La durée d'utilisation totale pour le visage est de 3 à 5 minutes environ.
- **Mode Hydratation:** Appliquez le sérum ou la crème de jour de votre choix ou encore un masque, mais évitez la peau autour des yeux. Massez doucement le visage dans le sens des muscles. Restez 2 à 3 minutes sur chaque zone.
- **Mode Lifting:** Appliquez un sérum ou une crème de jour si vous le souhaitez. Déplacez lentement l'appareil dans le sens des pores pendant 10 minutes. Évitez le contour des yeux.
- Durant l'utilisation, votre main doit tenir la barre du capteur sur le bord de la machine afin que la fonction d'échange d'ions fonctionne normalement.
- Durant l'utilisation, déplacez lentement l'appareil sans rester au même endroit sur le visage.
- En cas d'apparition d'une inflammation du visage, n'utilisez pas l'appareil tant que les signes de l'inflammation n'ont pas disparu.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine. Ne l'utilisez pas plusieurs fois par jour.
- Pour un fonctionnement optimal, les lames et le boîtier doivent rester propres.




Nettoyage

- L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne lavez pas l'appareil en le plaçant directement sous l'eau car cela l'endommagerait.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, corrosifs ou contenant un diluant volatil.
- Utilisez un chiffon doux ou un coton démaquillant pour essuyer l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (environ 3 mois), sortez-le de l'emballage et stockez-le avec la batterie entièrement chargée. Cela évite d'endommager la batterie à l'intérieur de l'appareil sous l'effet de défauts.




Des joues

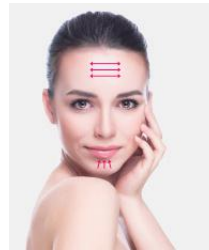

Front et mâchoire



Front et mâchoire

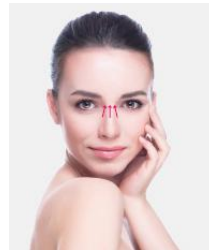

Nez

Mise au rebut



Mise au rebut de l'emballage

Triez l'emballage avant de le jeter.

Jetez le papier et le carton avec

les déchets à recycler et les films avec les ordures ménagères.



Mise au rebut de la brosse faciale

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens ayant des

systèmes de collecte sélective des déchets

pour les matières recyclables) Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Si la brosse faciale ne peut plus être utilisée au bout d'un certain temps, jetez-la conformément aux réglementations en vigueur dans votre ville ou pays. Ainsi, les appareils usagés sont recyclés de façon professionnelle, ce qui évite tout impact négatif sur l'environnement. Pour cette raison, les équipements électriques arborent le symbole représenté ici



Les batteries et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant

qu'utilisateur final, vous êtes tenu par la loi de rapporter toutes les batteries et batteries rechargeables, qu'elles contiennent des substances nocives* ou non, dans un point de collecte géré par les autorités locales ou à un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement. Rapportez l'intégralité du produit (y compris la batterie rechargeable) dans votre point de collecte en veillant à ce qu'il soit déchargé !

* indiquées comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux réglementations et lois européennes. La portée de la garantie se limite aux défauts techniques causés par des défauts de production. Si vous souhaitez faire intervenir la garantie, contactez votre service clients pour plus d'informations. Il pourra peut-être résoudre votre problème sans que vous ayez à retourner le produit au magasin ou à notre service après-vente. Notre service clients se tient à votre disposition !

Service clients

Pour plus d'informations sur les produits de Silk'n, rendez-vous sur votre site Web Silk'n : www.silkn.eu. Si l'appareil est endommagé, défectueux, a besoin de réparation ou si vous avez besoin de notre aide, veuillez contacter votre service clients Silk'n le plus proche. Le présent mode d'emploi peut également être téléchargé au format PDF sur www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu