

Glow

Gebruiksaanwijzing



2109_006_NL



www.silkn.eu • info@silkn.eu
Donk IB, 2991 LE Barendrecht
Nederland
Invention Works B.V.

Beautiful Technology
Silk'n[®]

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd.
Alle rechten voorbehouden.

Juridische mededeling

Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan haar producten of specificaties ten einde hun prestaties, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Informatie geleverd door Home Skinovations Ltd. wordt verondersteld juist en betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. Home Skinovations Ltd. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan. Er is geen sprake van licentieverlening door implicatie of anderszins door enig patent of patentrechten van Home Skinovations Ltd.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Home Skinovations Ltd. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Home Skinovations Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende het onderwerp in dit document. De verstrekking van dit document geeft u geen enkele licentie met betrekking tot deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald in een schriftelijke overeenkomst aangegaan met Home Skinovations Ltd. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V. Donk IB,
2991 LE Barendrecht, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu



Dit signaalsymbool biedt nuttige



aanvullende informatie voor hanteren en gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Verklaring van overeenstemming:
producten die zijn voorzien van dit
symbool voldoen aan alle toepasselijke

bepalingen van de Europese Economische Ruimte.

Veiligheidsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing staan veiligheidsinstructies voor het product. Dus. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om schade en letsel door onjuist gebruik te voorkomen.

- ⚠ Reinig en desinfecteer het apparaat voor en na gebruik.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet op een beschadigde huid met bijv. Letsel, wondjes, eczeem.
- ⚠ Gebruik dit apparaat niet als u herstelt na een operatie.
- ⚠ Gebruik dit apparaat niet rond uw ogen of wonden.
- ⚠ Gebruik dit apparaat niet als u fysieke, sensorische of psychologische problemen hebt, tenzij onder toezicht van een toezichthouder die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- ⚠ Kinderen en zwangere vrouwen mogen dit apparaat niet gebruiken.
- ⚠ Gebruik het apparaat maximaal twee keer per week. Behandel niet langer dan 15 minuten per sessie.
- ⚠ Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens reiniging en onderhoud.
- ⚠ Laad het apparaat niet op tijdens gebruik.
- ⚠ Het apparaat is niet waterdicht. Voorkom contact met water.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet tijdens het baden.
- ⚠ Als u pijn of afwijkingen voelt in uw huid of lichaam, stop dan direct met gebruik.
- ⚠ Demonteer of repareer dit product niet zelf.
- ⚠ Gebruik de meegeleverde usb-kabel voor opladen van het apparaat en zorg ervoor dat de oplaadspanning voldoet aan de vereisten van het product.

Specificatie

Model	FAC01
Nominale spanning	3.7 V
Batterijvermogen	500 mAh
Vermogen	5.0 V = 1A
Frequentie	20-30KHZ

Bediening

- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".
- Voer voordat u een gebied van het gezicht voor de eerste keer reinigt een gevoeligheidstest op een plek van de huid uit. Start uw behandeling alleen als er geen

bijwerkingen optreden.

- Druk 2 seconden op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
- Kies met de pijltjes de modus die u wilt gebruiken: Reinigen, Vochtinbrengen of Liften.
- **Modus Reinigen:** breng een reinigings-schuim of gezichtsreinigingslotion aan op het gehele gezicht. Vermijd de huid rondom de ogen. Reinig gedurende ongeveer 5-10 seconden de huid van het gezicht met het apparaat. Reinigen van het gehele gezicht duurt ongeveer 3-5 minuten.
- **Modus Vochtinbrengen:** breng een serum, een masker of uw favoriete dagcrème aan, maar vermijd de huid rondom de ogen. Masseer het gezicht zachtjes en volg hierbij de spieren. Masseer elk deel ongeveer 2-3 minuten.
- **Modus Liften:** breng een serum of uw favoriete dagcrème aan. Beweeg langzaam over de poriën en doe dit gedurende 10 minuten. Vermijd de huid rondom de ogen.
- Houd tijdens het gebruik de sensorstrook aan de rand van de machine vast, zodat de functie voor ionenimport en -export normaal kan werken.
- Houd bij langzaam bewegen het apparaat niet stil op één plek in het gezicht.
- Als er sprake is van ontsteking in het gezicht, mag het apparaat pas worden gebruikt nadat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen.
- Aanbevolen gebruik is 2-3 keer per week. Gebruik het apparaat niet meerdere malen per dag.
- Tijdens gebruik moeten schoepen en behuizing schoon gehouden worden.




Reiniging

- Het apparaat is niet waterdicht. Was het apparaat niet direct met water, want dit zal schade aan het apparaat veroorzaken.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Gebruik geen bijtende of agressieve, vluchtige reinigingsmiddelen.
- Veeg zachtjes met een zachte doek of wattenschijfje.
- Als het apparaat langere tijd (ongeveer 3 maanden) niet wordt gebruikt, berg het dan volledig opgeladen op. Dit om schade aan de

batterij in het apparaat te voorkomen.




Wangen

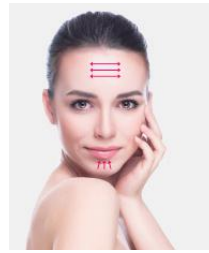

Voorhoofd en kaak



Voorhoofd en kaak

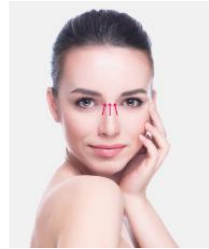

Neus

Afvoeren



De verpakking afvoeren. Sorteer de verpakking voor u deze afvoert. Voer het papier en karton af via oud papierinzameling en het overige verpakkingsmateriaal via de juiste inzamelingsdienst.



De gezichtsborstel afvoeren (Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van afval voor het recyclen van materialen.) Oude apparaten mogen niet worden afgevoerd met huishoudelijk afval! Mocht de gezichtsborstel op enig moment niet meer gebruikt kunnen worden, voer deze dan af in overeenstemming met de geldende verordeningen in uw stad of provincie. Hierdoor wordt verzekerd dat oude apparaten op professionele wijze worden gerecycled en worden ook negatieve gevolgen op het milieu uitgesloten. Daarom wordt elektrische apparatuur voorzien van het hier weergegeven symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden afgevoerd met huishoudelijke afval! Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten of niet, naar een gemeentelijk inzamelpunt te brengen, of naar een verkoper, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Breng het gehele product (inclusief de oplaadbare batterij) naar uw inzamelpunt en zorg dat deze niet geladen is!

* gekenmerkt met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Garantie

Dit product wordt gedekt met een garantie van 2 jaar volgens de Europese verordeningen en wetgeving. De omvang van de garantie op dit product is beperkt tot technische defecten die worden veroorzaakt door onjuiste productieprocessen. In het geval dat u aanspraak wilt maken op de garantie, neemt u contact op met onze klantenservice voor instructies. Misschien kunnen zij uw probleem oplossen zonder dat u het product hoeft terug te sturen naar de winkel of ons servicecentrum. Onze klantenservice helpt u graag verder!

Klantenservice

Meer informatie over de producten van Silk'n vindt u op de website voor uw regio: www.silkn.eu. Als het apparaat beschadigd of defect is, gerepareerd moet worden of als u onze hulp nodig hebt, neemt u dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Silk'n. Deze gebruiksaanwijzing is ook als pdf-bestand te downloaden vanaf: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu